

Legacy Cross Cut Rotierfeile aus Nickel-Titan

RX Only - Nur für den zahnärztlichen Gebrauch



Nur zur
einmaligen
Verwendung




Nicht
verwenden,
wenn das
Siegel
gebrochen
ist



Gebrauchs-
anweisung
beachten



Sterilisieren
vor
Gebrauch

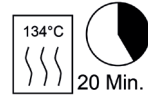

Autoklav
Temperatur und
Zeit

Materialzusammensetzung

Der operative Bereich besteht aus einer Nickel-Titan-Legierung.

Verwendungszweck

Zur Entfernung von Dentin und zur Erweiterung des Wurzelkanals.

Warnhinweise

Die Feilen werden nicht steril geliefert und müssen vor dem Gebrauch sterilisiert werden. Dieses Produkt enthält Nickel und sollte bei Personen mit einer diagnostizierten Nickelallergie nicht benutzt werden.

Gegenanzeigen

Keine bekannt.

Nebenwirkungen

Keine bekannt.

Sicherheitshinweise

1. Wie alle neuen Produkte muss auch dieses Produkt mit Vorsicht verwendet werden, bis Sie mit dem Gebrauch vertraut sind.
2. Für den Gebrauch der Rotierfeile ist ein verlangsames Handstück erforderlich.
3. Die Cross-Cut-Feilen können in Kombination mit einem für WaveOne® Gold, Reciproc® und TF® Instrumente entwickelten Antrieb verwendet werden.*
4. Cross-Cut-Feilen können bei 300 - 400 U/min und mit 300 g-cm verwendet werden.
5. Voraussetzung für eine fachkundige endodontische Behandlung ist ein gerader Zugang.
6. Üben Sie immer nur minimalen apikalen Druck aus. Die Feile nicht mit Gewalt in Richtung des Kanals führen.
7. Die Feilenrillen nach jeder Einführung in den Wurzelkanal reinigen.
8. Während der Behandlung den Wurzelkanal regelmäßig spülen und schmieren.
9. Im apikalen Bereich und in der Nähe von signifikanten Krümmungen vorsichtig sein.

*WaveOne® Gold ist eine eingetragene Handelsmarke von Dentsply International Inc.

Reciproc® ist eine eingetragene Handelsmarke von VDW.

TF® Instrumente ist eine eingetragene Handelsmarke von SybronEndo.

D&S Dental und LegacyEndo ist in keiner Weise mit Dentsply International Inc. verbunden.

Sterilisieren

Die Feilen müssen vor dem Gebrauch sterilisiert werden. Die ANSI-/ADA-Norm 28 empfiehlt:

- Reinigung der Instrumente mit warmem Wasser und Seife;
- Abspülen der Instrumente mit destilliertem oder deionisiertem Wasser;
- Instrumente lufttrocknen;
- offenes Ablegen der Instrumente in der Ablage des Sterilisators;
- Verwendung von frischem destilliertem oder deionisiertem Wasser;
- Einstellung des Sterilisators auf 134 °C (+/- 2 °C) und 20 Minuten;
- Rotierfeilen sind Instrumente, die für den Einsatz an einem Patienten geeignet sind;
- Entsorgungsempfehlung für die Feilen: Benutzte Feilen im Sondermüllbehälter verwahren.

IFU-Methode

Allgemeine Richtlinien für die Verwendung von Instrumenten:

1. Schaffung eines geraden Zugangs zu Wurzelkanaleingängen.
2. Einsatz einer #010-Handfeile zur Untersuchung der Gleitpfadlänge.
3. Einsatz der passende Apex Access-Feile (15/01, 15/02 und 20/02) zur Erweiterung des Wurzelkanals.
4. Anwendung der 26/07-Cross-Cut-Feile mit einer pickenden Bewegung.
5. Nach dem Erweitern des Wurzelkanals um 2-3 mm, die 25/07-Feile entfernen und reinigen, danach spülen, die Behandlung mit einer #010-Feile wiederholen.
6. In engeren Kanalsituationen eine #010-Handfeile (mit Spülung) verwenden, um das apikale Foramen des Kanals zu erreichen. Diese Feile kontinuierlich benutzen, bis es keinen Längenwiderstand mehr gibt.
7. Die Behandlung mit der 25/07-Feile fortsetzen. Falls dies noch nicht möglich ist, zuerst die 20/07-Feile in einem oder mehreren Arbeitsgängen verwenden, gefolgt von der 25/07-Feile.
8. Wenn die 25/07-Feile keinen Dentinabtrag in den apikalen Rillen aufweist, mit der 35/06- und/oder der 45/06-Feile fortfahren, bis die apikalen Rillen gefüllt sind.



Hergestellt von: D&S Dental LLC
3111 Hanover Rd.
Johnson City, TN 37604 USA
Phone: 1-800-441-4086



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP Den Haag
Die Niederlande



0120